



## DIGNOSTICS KIT AND INSTRUMENTS RAPID TEST/FERTILITY RANGE

## DIGNOSTICS KIT ET INSTRUMENTS TEST RAPIDE/ FERTILITÉ GAMME



### PREGNY-SCAN - CARTE / BANDE HCG TEST

Il s'agit d'un essai immunologique qualitatif rapide en une seule étape, basée sur le principe immunochromatographique pour la détection de l'hCG dans l'urine humaine.

Spécifique bêta HCG, Pas de réaction croisée: Spécifique  
Sensible: Détecte aussi bas que 20 mUI / ml hCG dans l'urine  
Sensibilité: 100%  
Spécificité: 99,9%  
Disponible en pack taille de 50 et 100 tests

### PREGNY-SCAN - HCG CARD / STRIP TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of hCG in human urine.

Specific: Beta hCG Specific, No cross-reaction  
Sensitive: Detects as low as 20 mIU/ml hCG in Urine  
Sensitivity: 100%  
Specificity: 99.9 %  
Available in Pack Size of 50 & 100 Tests



### OVU-SCAN LH TEST CARD

Il s'agit d'un essai immunologique qualitatif rapide en une seule étape, basée sur le principe immunochromatographique pour la détection de l'hormone lutéinisante dans l'urine humaine, indiquant l'ovulation.

Spécifique: Pas de réaction croisée  
Sensibilité: 100% Spécificité: 99,9%  
Disponible en Boîte de 10 et 50 tests

### OVU-SCAN LH CARD TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of Leutinizing hormone in human urine, indicating Ovulation.

Specific: No cross-reaction  
Sensitivity: 100 % Specificity: 99.9 %  
Available in Pack Size of 10 & 50 Tests



## INFECTIOUS DISEASE RANGE

### GAMME DES MALADIES INFECTIEUSES

#### HEPA-SCAN - HBSAG CARD / BANDE DE TEST

Il s'agit d'un, qualitatif, une étape dosage immunologique rapide basé sur le principe immunochromatographique pour la détection de l'Ag HBs dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée avec d'autres antigènes. Détecte toutes les formes de HBV

Sensible: Détecte aussi bas que 0.5ng/ml de l'AgHBs Sensibilité: 100%

Spécificité: 99,9%

Disponible en pack taille de 50 et 100 tests  
HbsAg ELISA AUSSI DISPONIBLE

#### HEPA-SCAN - HBSAG CARD / STRIP TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of HbsAg in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction with other antigens. Detects all forms of HBV

Sensitive: Detects as low as 0.5ng/ml of HbsAg Sensitivity: 100%

Specificity: 99.9 %

Available in Pack Size of 50 & 100 Tests

HbsAg ELISA ALSO AVAILABLE



#### PAREEKSHAK - TEST CARD - 1 / 2 TRILINE VIH

Il s'agit d'un essai immunologique qualitatif rapide basé sur le principe chromatographique immunologique pour la détection du VIH -1 / 2 d'anticorps dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée avec d'autres antigènes. Antigènes du VIH recombinantes sont revêtus. Sensibilité: 100%

Spécificité: 99,9% Disponible en taille de paquet de 20, 50 et 100 tests

VIH-1/2 ELISA AUSSI DISPONIBLE

#### PAREEKSHAK - HIV - 1/2 TRILINE CARD TEST

It is a rapid qualitative immunoassay based on the Immuno chromatographic principle for the detection of HIV -1/2 antibodies in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction with other antigens. Recombinant HIV antigens are coated.

Sensitivity: 100%

Specificity: 99.9%

Available in pack size of 20, 50 & 100 Tests

HIV-1/2 ELISA ALSO AVAILABLE



#### PAREEKSHAK - TEST VIH -1 / 2 SPOT

Le test visuel rapide pour la détection du VIH-1 et VIH-2 dans le sérum ou le plasma est basée sur l'écoulement à travers procédé.

Simple: ne nécessite aucun équipement

Spécifique: antigènes hautement purifiés sont déposés. Antigènes protéiques recombinantes du VIH et terminaux

Sensibilité: 100%

Spécificité: 99,9%

Disponible en Boîte de 20, 50 et 100 tests

VIH-1/2 ELISA AUSSI DISPONIBLE

#### PAREEKSHAK - HIV -1/2 SPOT TEST

The rapid visual test for detection of HIV-1 and HIV-2 antibodies in serum or plasma is based on the flow through method.

Simple: Requires no equipment

Specific: Highly purified antigens are coated. HIV recombinant protein antigens and terminal

Sensitivity: 100%

Specificity: 99.9%

Available in Pack Size of 20, 50 & 100 Tests

HIV-1/2 ELISA ALSO AVAILABLE



### HEPA-SCAN HCV TEST CARD

Il s'agit d'un qualitatif rapide, dosage immunologique en une étape fondée sur le principe immunochromatographique pour la détection des anticorps anti-VHC dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée avec d'autres antigènes. Antigènes du VHC recombinantes, les deux protéines structurales structurelles (nucléocapside) et non, y compris NS 3, 4 et NS 5 sont revêtus.

Sensibilité: 100%

Spécificité: 99,9%

Disponible en Boîte de 20, 50 et 100 tests  
VHC ELISA AUSSI DISPONIBLE

### HEPA-SCAN HCV CARD TEST

It is a rapid qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of HCV antibodies in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction with other antigens. Recombinant HCV antigens, both structural (nucleocapsid) and non structural proteins, including NS 3, NS 4 and NS 5 are coated.

Sensitivity: 100%

Specificity: 99.9%

Available in Pack Size of 20, 50 & 100 Tests  
HCV ELISA ALSO AVAILABLE



### HEPA-SCAN HCV TEST CARD

Il s'agit d'un, qualitatif, une étape dosage immunologique rapide basé sur le principe immunochromatographique pour la détection d'anticorps (IgG et IgM) dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée

Sensibilité: 99,6%

Spécificité: 99,7%

Disponible en pack Taille de 20 et 50 tests

### HEPA-SCAN HCV CARD TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of antibodies (IgG and IgM) in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction

Sensitivity: 99.6%

Specificity: 99.7%

Available in Pack Size of 20 & 50 Tests



### BHAT BIO-SCAN DENGUE IGM / IGG TEST CARD

Il s'agit d'un, qualitatif, une étape dosage immunologique rapide basé sur le principe immunochromatographique avant la détection des anticorps IgG et IgM pour virus de la dengue de type sérologique DEN-1, II, IV, dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée

Sensible: la vitesse de migration la plus faible dans spécimen du titre

Sensibilité: 98%

Spécificité: 99%

Disponible en Boîte de 10 tests

### BHAT BIO-SCAN DENGUE IGM/ IGG CARD TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of IgG and IgM antibodies to dengue virus sero type DEN-1, II, IV in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction

Sensitive: Highest migration speed in low titer specimen

Sensitivity: 98%

Specificity: 99%

Available in Pack Size of 10 Tests





### BHAT BIO-SCAN - TB CARD TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of Mycobacterium tuberculosis (MTB) in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction

Sensitivity: 83 %

Specificity: 95.6%

Available in Pack Size of 10 & 20 Tests



### BHAT BIO-SCAN CHIKUNGUNYA IGM / IGG TEST SPOT

Il s'agit d'un dosage à base de immunocentration pour la détection d'anticorps IgM / IgG à Chikungunya dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Recombinant E1 et E2 antigènes dérivés de protéines structurales de Chikungunya a été utilisé pour donner une spécificité élevée

Stockage: Stable @ 2-8 °C

Durée de conservation: 18 mois

Disponible en Boîte de 10 tests

### BHAT BIO-SCAN CHIKUNGUNYA IGM/IGG SPOT TEST

It is an Immunoconcentration based assay for the detection of IgM/IgG antibodies to Chikungunya in human serum or plasma.

Specific: Recombinant E1 and E2 antigens derived from structural protein of Chikungunya has been used to give high specificity

Storage: Stable @ 2-8°C

Shelf Life: 18 months

Available in Pack Size of 10 Tests



## CARDIAC RANGE

## GAMME CARDIAQUE

### HEARTSCAN TROPONINE-I CARD TEST

Il s'agit d'un, qualitatif, une étape dosage immunologique rapide basé sur le principe immunochromatographique pour la détermination de la troponine cardiaque-I (c Tsf) dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée

Sensible: 0,5 ng / ml

Sensibilité: 98,5%

Spécificité: 98,4%

Disponible en Boîte de 10 tests

### HEARTSCAN TROPONIN-I CARD TEST

It is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the determination of Cardiac Troponin-I(c Tnl) in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction

Sensitive: 0.5 ng/ml

Sensitivity: 98.5%

Specificity: 98.4%

Available in Pack Size of 10 Tests





## MALARIA RANGE

### GAMME DE PALUDISME

#### **MALERISCAN TM MALARIIII A PF / PV D'ESSAI DE CARTE D'ANTICORPS**

il est un, qualitative, une étape test immunologique rapide basée sur le principe immunochromatographique pour la détection des anticorps contre le paludisme Pf / Pv dans le sérum ou le plasma humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée  
Sensibilité: 88,24% pour le PF et 91,3% pour Pv  
Spécificité: 98%  
Disponible en pack Taille: 10, 20 & 50 Tests

#### **MALERISCAN TM MALARIIII A P.F/P.V ANTIBODY CARD TEST**

it is a rapid, qualitative, one-step immunoassay based on the immunochromatographic principle for the detection of Malaria Pf/Pv antibodies in human serum or plasma.

Specific: No cross-reaction  
Sensitivity: 88.24% for Pf & 91.3% for Pv  
Specificity: 98%  
Available in Pack Size: 10, 20 & 50 Tests



#### **MALARISCAN TM MALARIIII A P.F / P.V CARD TEST DE L'ANTIGÈNE**

Il s'agit d'un qualitatif, une étape Immuno-essai à base rapide, chromatographique pour la détection de PHRP II et Plasmodium lactate déshydrogénase (pLDH) spécifique à Pf / Pv dans le sang total humain.

Spécifique: Pas de réaction croisée  
Sensible: Détecte les 100 à 200 parasites / ul de sang entier  
Sensibilité: 98%  
Spécificité: 95%  
Disponible en Boîte de 10, 20 et 50 tests

#### **MALARISCAN TM MALARIIII A P.F/P.V ANTIGEN CARD TEST**

It is a rapid, qualitative, one-step Immuno chromatographic based assay for the detection of pHRP II and Plasmodium lactate dehydrogenase (pLDH) specific to Pf/Pv. in human whole blood.

Specific: No cross-reaction  
Sensitive: Detects 100 to 200 parasites/ul of whole blood  
Sensitivity: 98%  
Specificity: 95%  
Available in Pack Size of 10, 20 & 50 Tests





## URINE STRIPS BANDES D'URINE

### BHAT BIO-SCAN BANDELETTES URINAIRES

Un test rapide pour la détermination semi-quantitative de la présence et la concentration de glucose bilirubine, cétone, Sp.Gravity, sang, pH, protéines, Urobilinogène, nitrites et leucocytes dans l'urine.

- Simple: Facile à utiliser (jauge)
- Spécifique: très spécifique à l'analyte à détecter
- Sensibilité: très sensible
- Disponible en Boîte de 100 bandes en bouteille

### BHAT BIO-SCAN URINE STRIPS

A rapid test for the semiquantitative determination for the presence & concentration of Glucose Bilirubin, Ketone, Sp.Gravity, Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite & Leukocytes in urine.

- Simple: Easy to use (dipstick)
- Specific: Highly specific to the analyte to be detected
- Sensitivity: Highly sensitive
- Available in Pack Size of 100 strips in bottle



## ELISA RANGE ELISA GAMME

### PAREEKSHAK - HIV-1/2 ELISA

Un kit d'immuno-essai enzymatique pour le dosage qualitatif du VIH-1/2 dans le sérum ou le plasma humain. Le test est basé sur indirecte de non-concurrence "sandwich" ELISA. Antigènes du VIH sont appliqués sur des puits de microtitration.

- La préparation des réactifs Minimal: Simple
- Spécifique: spécificité absolue, revêtu avec le VIH-1 et 2 protéines recombinantes. 1 1
- Sensible: Très sensible, détecte les conversions sérologiques précoces.
- Sensibilité: 100%
- Spécificité: 100%
- Disponible en Boîte de 96 puits

### PAREEKSHAK - HIV-1/2 ELISA

An enzyme immunoassay kit for the qualitative determination of HIV-1/2 in human serum or plasma. The test is based on indirect non-competitive "sandwich" ELISA. HIV antigens are coated onto microtiter wells.

- Simple: Minimal reagent preparation
- Specific: Absolute specificity, coated with recombinant HIV-1 & 2 proteins. 1 1
- Sensitive: Highly sensitive, detects early sero conversions.
- Sensitivity: 100%
- Specificity : 100 %
- Available in Pack Size of 96 wells



### HEPA-SCAN - HBSAG ELISA

Un kit d'immuno-essai enzymatique pour le dosage qualitatif d'HbsAg dans le sérum ou le plasma humain. Le test est basé sur la non-compétitif "sandwich" ELISA direct.

La préparation des réactifs Minimal: Simple  
Spécifique: Une spécificité élevée

Sensible: haute sensibilité. Détecte inférieur à 0,2 ng / ml des deux sous-types ad et ay de HbsAg

Sensibilité: 100%

Spécificité: 99,9%

Disponible en Boîte de 96 puits

### HEPA-SCAN - HBSAG ELISA

An enzyme immunoassay kit for the qualitative determination of HbsAg in human serum or plasma. The test is based on direct non-competitive "sandwich" ELISA.

Simple: Minimal reagent preparation  
Specific: High specificity

Sensitive: High sensitivity. Detects less than 0.2 ng/ml of both ad and ay subtypes of HbsAg

Sensitivity: 100%

Specificity: 99.9 %

Available in Pack Size of 96 wells



### HEPA-SCAN - VHC ELISA

Un kit d'immuno-essai enzymatique pour le dosage qualitatif du VHC dans le sérum ou le plasma humain. Le test est basé sur indirecte de non-concurrence «sandwich» ELISA.

La préparation des réactifs Minimal: Simple  
Spécifique: très spécifiques

Sensible: très sensible. Détecte les conversions sérologiques précoces

Sensibilité: 99,1%

Spécificité: 99,5%

Disponible en Boîte de 96 puits

### HEPA-SCAN - HCV ELISA

An enzyme immunoassay kit for the qualitative determination of HCV in human serum or plasma. The test is based on indirect non-competitive "sandwich" ELISA.

Simple: Minimal reagent preparation  
Specific: Highly specific

Sensitive: Highly sensitive. Detects early sero conversions

Sensitivity: 99.1%

Specificity: 99.5 %

Available in Pack Size of 96 wells





## CLINICAL CHEMISTRY

Chimie clinique s'intéresse à l'analyse de fluides corporels à fournir des informations opportunes, pertinentes, exactes et précises sur l'état clinique ou l'homéostasie normale du corps humain. Une grande variété de biomolécules (glucides, protéines, lipides, vitamines, minéraux, enzymes, des hormones et des acides nucléiques, etc) et leur analyse en utilisant les fluides corporels aide dans le diagnostic et le pronostic de diverses conditions cliniques.

HEMOGLOBINE  
hémoglobine

PROFIL D'OS  
L'acide urique  
phosphatase alcaline  
CALCIUM  
PHOSPHORE

PROFIL DE DIABETE  
GLUCOSE

ELECTROLYTES PROFIL  
CHLORURE

PROFIL CARDIAQUE  
Cholestérol HDL  
ALT  
AST  
CHOLESTÉROL

PROFIL DE REIN  
CREATININE  
Protéines totales MICRO  
TRIGLYCÉRIDE

Bilan hépatique  
ALBUMIN  
BILIRUBINE  
protéines totales  
Urée



Clinical chemistry is concerned with the analysis of body fluids to yield timely, relevant, accurate and precise information on the clinical status or the normal homeostasis of the human body. A wide variety of biomolecules (carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals, enzymes, hormones and nucleic acids etc) and their analysis using body fluids helps in the diagnosis and prognosis of various clinical conditions.

HAEMOGLOBIN  
hAEMOGLOBIN

BONE PROFILE  
URIC ACID  
ALKALINE PHOSPHATASE  
CALCIUM  
PHOSPHORUS

DIABETIC PROFILE  
GLUCOSE


ELECTROLYTES PROFILE  
CHLORIDE

CARDIAC PROFILE  
HDL CHOLESTEROL  
ALT  
AST  
CHOLESTEROL

RENAL PROFILE  
CREATININE  
MICRO TOTAL PROTEIN  
TRIGLYCERIDES

HEPATIC PROFILE  
ALBUMIN  
BILIRUBIN  
TOTAL PROTEIN  
UREA  
TRIGLYCERIDES

HEPATIC PROFILE  
ALBUMIN  
BILIRUBIN  
TOTAL PROTEIN  
UREA

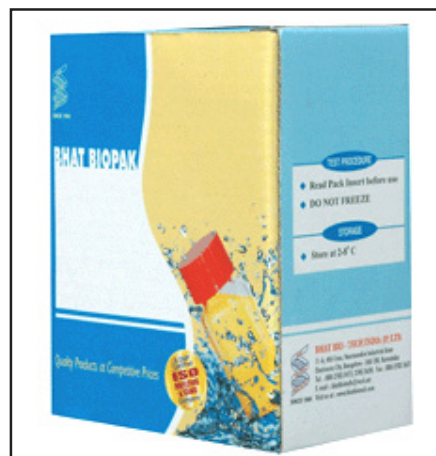





## HAEMATOLOGY HÉMATOLOGIE

### ANTI A (IGM) MONOCLONALE

Anti A est destiné à la reconnaissance in-vitro des antigènes des groupes sanguins A sur les globules rouges humains (globules rouges).

Couleur - Bleu

Titre - 1/256

Avidité: <5 - 7 secondes

Temps de réaction - 3 secondes

Intensité: + + + +

Pack Size - 5 ml et 10 ml

### ANTI A (IGM) MONOCLONAL

Anti A est destiné à la reconnaissance in-vitro des antigènes des groupes sanguins A sur les globules rouges humains (globules rouges).

Couleur - Bleu


Titre - 1/256

Avidité: <5 - 7 secondes

Temps de réaction - 3 secondes

Intensité: + + + +

Pack Size - 5 ml et 10 ml

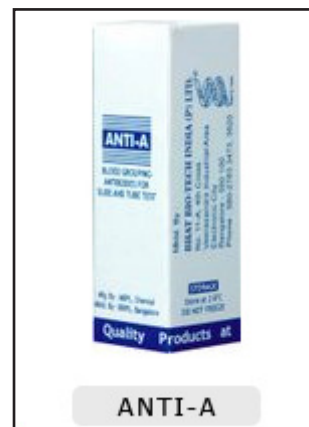

ANTI-A

### ANTI B (IGM) MONOCLONALE

Anti B est destiné à la reconnaissance in vitro du groupe sanguin B antigènes sur les globules rouges humains (globules rouges).

Couleur - Jaune

Titre - 1/256

Avidité: <5 - 7 secondes

Temps de réaction - 3 secondes

Intensité: + + + +

Pack Size - 5 ml et 10 ml

### ANTI B (IGM) MONOCLONAL

Anti B is intended for in-vitro recognition of the blood group Antigens B on human red blood cells (RBCs).

Colour - Yellow


Titre - 1/256

Avidity : < 5 – 7 seconds

Reaction Time - 3 seconds

Intensity : + + + +

Pack Size - 5 ml and 10ml

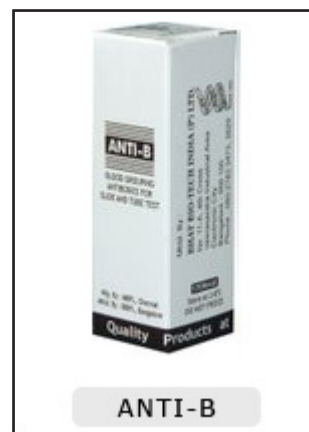

ANTI-B

### ANTI AB (IGM) MONOCLONALE

Anti AB is intended for in-vitro recognition of the blood group Antigens AB on human red blood cells (RBCs).

Colour - Colourless

Titre - 1/256

Avidity : < 5 – 7 seconds

Reaction Time - 3 seconds

Intensity : + + + +

Pack Size - 5 ml and 10ml

### ANTI AB (IGM) MONOCLONAL

Anti AB is intended for in-vitro recognition of the blood group Antigens AB on human red blood cells (RBCs).

Colour - Colourless

Titre - 1/256

Avidity : < 5 – 7 seconds

Reaction Time - 3 seconds

Intensity : + + + +

Pack Size - 5 ml and 10ml



ANTI-AB



**ANTI D (IGM / (IGG + IGM))  
MONOCLONAUX**


Anti D est destiné à la reconnaissance in-vitro des antigènes de groupe sanguin D sur les globules rouges humains (globules rouges).

Couleur - incolore  
Titre - 1/256  
Avidité: <5 - 7 secondes  
Temps de réaction - 3 secondes  
Intensité: + + + +  
Pack Size - 5 ml et 10 ml

**ANTI D (IGM / (IGG+IGM))  
MONOCLONAL**

Anti D is intended for in-vitro recognition of the blood group Antigens D on human red blood cells (RBCs).

Colour - Colourless  
Titre - 1/256  
Avidity : < 5 – 7 seconds  
Reaction Time - 3 seconds  
Intensity : + + + +  
Pack Size - 5 ml and 10ml

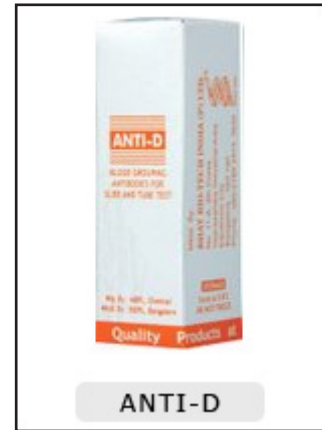

**SEROLOGY**

**SÉROLOGIE**

**TYPHO (WIDAL) TEST SUR LAME**

Basé sur le principe de l'agglutination au latex  
Test quantitatif qualitative et semi  
Kit doit être conservé à 2 - 8 ° C  
Détection des anticorps contre typhi 'O', H, AB & antigènes BH  
Nécessite échantillon de sérum 1 goutte  
Le résultat peut être observé à la fin de 1 minute  
Disponible dans la taille de paquet de 2x5ml, 2x 10ml et 4x5ml

**TYPHO (WIDAL) SLIDE TEST**

Based on Latex agglutination principle  
Qualitative & Semi quantitative test  
Kit should be stored at 2 - 8° C  
Detects Antibodies against typhi 'O', H, AB & BH Antigens  
Requires 1 drop serum sample  
Result can be observed at the end of 1 minute  
Available in pack size of 2x5ml, 2x 10ml and 4x5ml




**RPR TEST**

Basé sur le principe de l'agglutination au latex  
Test tréponémique pour qualitative et semences - non Rapid  
La détermination quantitative de reagin sérum sont en (ou) Plasma  
Nécessite 1 goutte de sérum / plasma échantillon  
Kit doit être stocké @ 2-8 ° C  
Le résultat peut être observé à la fin de 4 minutes  
Disponible dans la taille de paquet de 50 essais et 100 tests.

**RPR TEST**

Based on Latex agglutination principle  
Rapid non - treponemal test for qualitative & Semi quantitative determination of reagin are in serum (or) Plasma  
Requires 1 drop serum / Plasma sample  
Kit should be stored @ 2 - 8° C  
Result can be observed at the end of 4 Minutes  
Available in pack size of 50 tests and 100 tests.

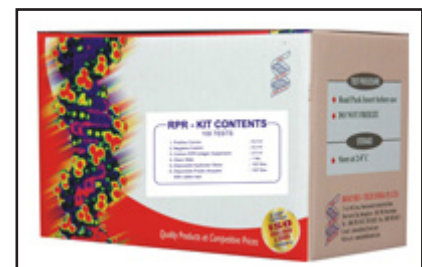



**RF TEST**

Test sur lame Latex  
 Sur la base de latex agglutination Principe  
 Test quantitatif qualitative et semi pour le facteur rhumatoïde  
 Kit doit être stocké @ 2 - 8 ° C  
 Nécessite un seul échantillon de sérum baisse  
 Le résultat peut être observé à la fin de 2 minutes  
 Très sensible de 20 UI / ml  
 Disponible dans la taille de paquet de 25, 50 et 100 tests

**RF TEST**

Latex Slide test  
 Based on latex agglutination Principe  
 Qualitative & Semi quantitative test for Rheumatoid factor  
 Kit should be stored @ 2 - 8° C  
 Requires only one drop Serum sample  
 Result can be observed at the end of 2 minutes  
 Highly Sensitive 20 IU / ml  
 Available in pack size of 25, 50 and 100 tests




**CRP TEST**

Test sur lame Latex  
 Sur la base de latex agglutination Principe  
  
 Test quantitatif qualitative et semi de protéine C - réactive dans le sérum humain  
 Kit devrait être boutique @ 2 - 8 ° C  
 Nécessite un seul échantillon de sérum baisse  
 Le résultat peut être observé à la fin de 2 minutes  
 Sensibilité = 0,6 mg / dl  
 Disponible dans la taille de paquet de 25, 50 et 100 tests

**CRP TEST**

Latex Slide test  
 Based on latex agglutination Principe  
  
 Qualitative & Semi quantitative test for C - reactive protein in human serum  
 Kit should be store @ 2 - 8° C  
 Requires only one drop Serum sample  
 Result can be observed at the end of 2 minutes  
 Sensitivity = 0.6 mg / dl  
 Available in pack size of 25, 50 and 100 tests

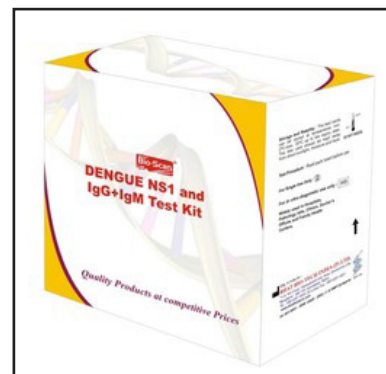

**ASO TEST**

Test sur lame Latex  
 Basé sur le principe de l'agglutination au latex  
  
 Test quantitatif qualitatif et demi pour anti-streptomycine o dans le sérum humain  
 Kit devrait être boutique @ 2 - 8 ° C  
 Nécessite un seul échantillon de sérum baisse  
 Le résultat peut être envoyer après 2 minutes  
 Sensibilité = 200 UI / ml  
 Disponible dans la taille de paquet de 25, 50 et 100 tests

**ASO TEST**

Latex slide test  
 Based on Latex agglutination principle  
  
 Qualitative & semi quantitative test for anti-streptomycin o in human serum  
 Kit should be store @ 2 - 8° C  
 Requires only one drop Serum sample  
 Result can be send after 2 minutes  
 Sensitivity = 200 IU/ml  
 Available in pack size of 25, 50 and 100 tests

